


Rearpack® DMT-dT-CE-фосфорамидит

<http://ru.lumiprobe.com/p/dt-ce-phosphoramidite-98796-51-1>

Rearpack® DMT-dT-CE-фосфорамидит — производное дезокситимидинфосфорамидита, которое может быть использовано для олигонуклеотидного синтеза.

Фосфорамидитный метод является стандартным для синтеза олигонуклеотидов. В этом методе добавление одного нуклеотида проводится по синтетическому циклу с соединением фосфорамидита и олигонуклеотида, окислением или сульфурованием фосфита и депротекцией группы ДМТ. Этот цикл выполняется автоматическим синтезатором, и олигонуклеотиды могут быть легко и быстро синтезированы с его помощью.

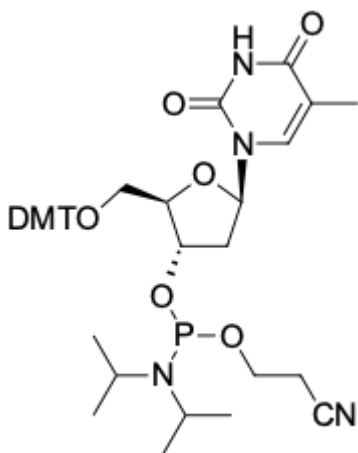

Структура DMT-dT-CE-фосфорамидит

Общие свойства

Вид продукта:	порошок от белого до грязно-белого цвета
Молекулярная масса:	744.83
CAS-номер:	98796-51-1
Брутто-формула:	$C_{40}H_{49}N_4O_8P$
Контроль качества:	ЯМР ^{31}P (98+%), ЯМР 1H и ВЭЖХ-МС (95+%), функциональное тестирование в олигонуклеотидном синтезе
Условия хранения:	12 месяцев (с момента доставки) при $-20^{\circ}C$ в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели <i>in vitro</i> , для людей или животных или в коммерческих целях.

Олигонуклеотидный синтез

Растворитель:	ацетонитрил
Условия конденсации:	стандартные условия конденсации, рекомендуемые производителем синтезатора; обычно 45 секунд при использовании 0.45M активатора ЕТТ
Условия отщепления:	АМА (40% метиламин, 25% аммиак, 1:1) 65 градусов, 20 минут; 25% аммиак 20 часов при 55 градусах